



## Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil




Oxygène & Aérosolthérapie ▪ Oxygénothérapie

## Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil

La pièce en T avec réservoir pour oxygène en phase de réveil d'Intersurgical a été conçue pour délivrer, en post-opératoire, avant l'extubation ou le retrait du dispositif supraglottique, de l'oxygène supplémentaire aux patients respirant spontanément, pendant le transfert et en salle de réveil. Grâce à une conception légère, la traction sur la sonde d'intubation ou le dispositif supraglottique est minimale. Le réservoir offre une indication visuelle et auditive de la respiration du patient.



### % d'Oxygène délivré à différents débits\*

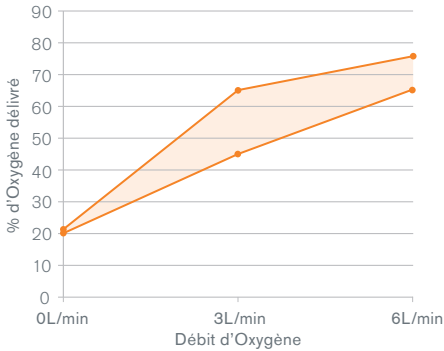

Usage unique, sans latex ni phtalates

\*Dispositif pour administration d'oxygène à performance variable. La concentration d'oxygène délivrée dépend du modèle respiratoire du patient.  
Référence: Rapport de test interne, Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil.

### Léger

Traction minimale sur le raccord patient

### Mouvements du réservoir

offrant une indication visuelle de la respiration

### Matériau souple

offrant une indication audible de la respiration

### Le réservoir se remplit d'oxygène lors de l'expiration

pour accroître la concentration délivrée d'oxygène

### Faible réinhalation de CO<sub>2</sub>

### Embout 6mm

conforme BS EN 13544-2, pour une connexion sécurisée du tuyau à oxygène

### Raccord standard 15mm

connexion sur toute sonde d'intubation ou dispositif supraglottique

Faire une demande

[www.intersurgical.fr/produits/oxygeno-aerosoltherapie/piece-en-t-avec-reservoir-pour-oxygene-en-phase-de-reveil](http://www.intersurgical.fr/produits/oxygeno-aerosoltherapie/piece-en-t-avec-reservoir-pour-oxygene-en-phase-de-reveil)

Référence	Description	Long. tuyau	Qté/bte
1041000	Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil		100
1041001	Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil et tuyau	2.1m	40
1041002	Pièce en T avec réservoir pour Oxygène en phase de réveil et masque oxygène moyenne concentration adulte Intersurgical EcoLite™, et tuyau	2.1m	55



33, Avenue Du Maréchal De Lattre De Tassigny, Le Péripole, 94127 Fontenay-Sous-Bois Cedex  
T: +33 (0)1 48 76 72 30 F: +33 (0)1 48 76 91 38 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 et ISO 14001:2015

**Pensez-y avant d'imprimer**  
Economisons les ressources.  
Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.

IS10.32 FR • Issue 3 07.19