



Réanimation Néonatale

avec PEEP réglable



Soins Intensifs ▪ Circuits Respiratoires pour Soins Intensifs

Systèmes de réanimation néonatale avec PEEP réglable

Une gamme de dispositifs en 10mm pour la réanimation du nouveau-né, incorporant un orifice à contrôle variable sur le raccord coudé permettant une PEEP réglable.

Le débit traversant le dispositif doit être réglé selon le débit inspiratoire de pointe requis pour le patient. La pression inspiratoire de pointe est également réglée par le clinicien sur l'appareil de réanimation, ainsi la PEEP peut être réglée tout près du patient à l'aide de la molette crantée si besoin.

Le raccord patient 22M/15F polyvalent s'adapte sur tout type d'interface et est pourvu d'une rotule pour accroître le confort du patient et améliorer l'étanchéité.

Ces dispositifs peuvent être utilisés en services de soins intensifs pédiatriques ou en obstétrique, avec les plateformes de réanimation et générateurs de débit suivants :

- Dräger®
- Viamed Tom Thumb®
- Fisher & Paykel® Neopuff®

Les systèmes de réanimation néonatale sont disponibles en différentes longueurs convenant à la plupart des types d'équipement et de positionnement du patient.

Disponible en version 0.8m, 1.2m et 2m

Plus de choix selon vos différents besoins


Molette de PEEP, à réglages crantés

Prévient toute manipulation accidentelle lors de l'utilisation



Connexion polyvalente 22M/15F

convenant à tout type d'interface patient

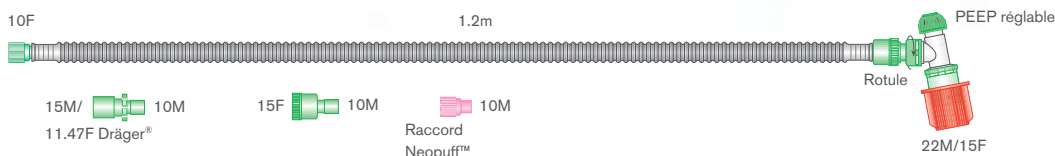

👁️ illustration

Référence	Description	Qté/bte
6430000	Système de réanimation néonatale 10mm Flextube avec PEEP réglable, coude à double rotule, 0.8m	15
6431000	Système de réanimation néonatale 10mm Flextube avec PEEP réglable, coude à double rotule, 1.2m	15
6432000	Système de réanimation néonatale 10mm Flextube avec PEEP réglable, coude à double rotule, pour Neopuff®, 1.2m	15
6432001	Système de réanimation néonatale 10mm Flextube avec PEEP réglable, coude à double rotule, pour Neopuff®, 2m	10
👁️ 6433000	Système de réanimation néonatale 10mm Flextube avec PEEP réglable, coude à double rotule, universel (Neopuff® inclus), 1.2m	15

Faire une demande

Dräger est une marque déposée de Drägerwerk AG & Co. KGaA. Tom Thumb est une marque déposée de Viamed, Ltd. Fisher & Paykel est une marque déposée de Fisher & Paykel Healthcare Limited. Neopuff est une marque déposée de Fisher & Paykel Healthcare Limited.



33, Avenue du Maréchal De Lattre De Tassigny, Le Pérépole, 94127 Fontenay-Sous-Bois Cedex
T: +33 (0)1 48 76 72 30 F: +33 (0)1 48 76 91 38 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 et ISO 14001:2015

Pensez-y avant d'imprimer
Economisons les ressources.
Si vous devez imprimer ce document, faites-le recto verso.

IS1.9 FR • Issue 8 07.21