




Cirrus™ 2

Une gamme de nébuliseurs et de kits

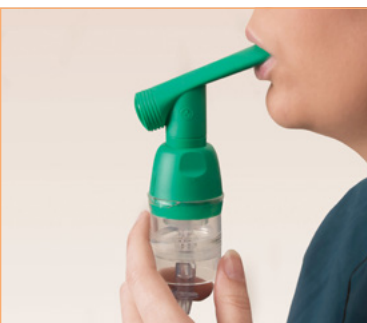

Oxygène & Aérosolthérapie ▪ Nébulisation



Nébuliseur Cirrus™2 et gamme de kits

Le nébuliseur Cirrus2 est pourvu d'une cuve graduée indiquant la quantité restante de médicament dans le nébuliseur et un capuchon disposant d'un système d'ouverture rapide, en 1/4 de tour. Cette caractéristique permet un remplissage rapide et une meilleure étanchéité entre la cuve et le capuchon.

Le nébuliseur Cirrus2 est conçu pour délivrer un aérosol médicamenteux à déposition trachéobronchique. Les spécificités du nébuliseur sont détaillées dans la documentation fournie avec le produit.

Le kit Cirrus2 avec masque comprend le masque aérosol Intersurgical EcoLite™, un masque sans PVC réduisant l'impact environnemental.



Cône standard 22F

S'adapte aux masques, pièces en T ou embouts buccaux


Ouverture facile et rapide

Un quart de tour, avec clic de verrouillage

Cuve de nébulisation graduée

Préparation rapide

Le Cirrus2 fonctionne dans une orientation allant de la verticale à l'horizontale

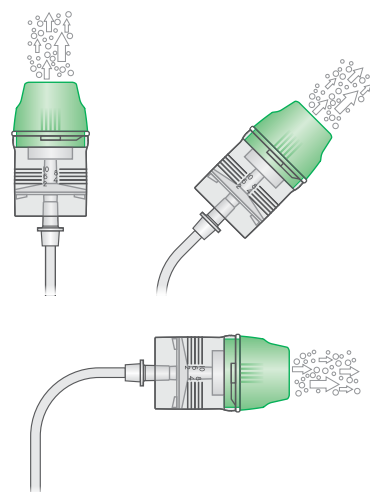

Pièce en T auto-occlusive

Le Cirrus2 est disponible avec une pièce en T auto-occlusive, permettant au nébuliseur d'être inséré sur (ou retiré de) la pièce en T connectée au circuit respiratoire sans perturber la ventilation du patient ou déclencher une alarme par inadvertance.

22M



22F



Kit nébuliseur Cirrus™2 avec masque Intersurgical EcoLite™

Bienvenue dans la Zone de Confort

La conception unique et les matériaux utilisés dans la fabrication du masque Intersurgical EcoLite™ offrent un confort accru du patient et un impact environnemental réduit.

Confortable pour le Patient

L'amélioration du confort du patient est l'une des clés du développement du masque Intersurgical EcoLite™. Les dernières techniques de fabrication permettent de combiner deux matériaux sans PVC au sein d'un même dispositif. Le polypropylène constituant le corps du masque Intersurgical EcoLite™ est transparent, léger et suffisamment rigide pour maintenir la forme du masque, tandis que le second matériau en TPE, plus souple, constitue la lèvre étanche entrant en contact avec le visage du patient.

Confortable pour l'Environnement

Le masque Intersurgical EcoLite™ est le pilier de la gamme Eco, véritable reflet de notre engagement dans le développement durable. De nombreux organismes remettent en question l'utilisation du PVC dans les produits médicaux et son impact sur l'environnement. L'utilisation de matériaux alternatifs a permis l'élimination du PVC dans le masque Intersurgical EcoLite™, réduisant de fait l'impact environnemental.



Intersurgical EcoLite

Gamme Eco

Ourlet nasal incurvé

S'adapte à différentes formes de nez pour prévenir toute fuite de médicament nébulisé au niveau des yeux

Sans pince-nez métallique

Compatible IRM

Lèvre souple étanche


Accroît le confort du patient

L'élastique peut se positionner sur ou sous les oreilles du patient*

La position sous les oreilles aide à prévenir l'irritation et la formation d'ulcération

Système de double lèvre étanche

Assurant une parfaite adaptation sur toute forme de visage

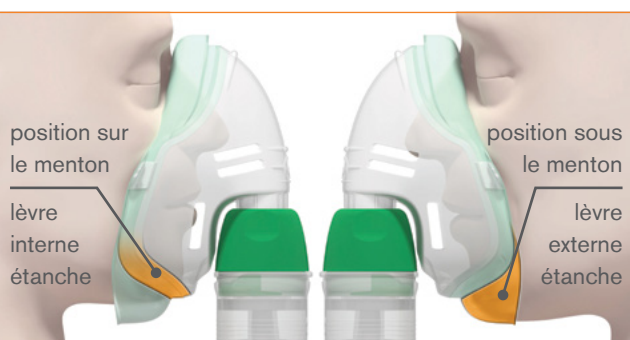

*Uniquement pour les modèles adultes



Nébuliseur Cirrus™2 et kits

REF	Description	Long. tuyau	Qté/bte
1402000	Nébuliseur Cirrus2		75
1453015	 Kit nébuliseur Cirrus2, avec masque Intersurgical EcoLite™ adulte et tuyau	2.1m	30 
1453017	Kit nébuliseur Cirrus2, avec masque Intersurgical EcoLite™ adulte et tuyau sans PVC	2.1m	30 
1453014	Kit nébuliseur Cirrus2, avec masque Intersurgical EcoLite™ adulte et tuyau à raccord universel	2.1m	30 
1454015	Kit nébuliseur Cirrus2, avec masque Intersurgical EcoLite™ pédiatrique et tuyau	2.1m	36 
1454017	Kit nébuliseur Cirrus2, avec masque Intersurgical EcoLite™ pédiatrique et tuyau à raccord universel	2.1m	40 
1455000	Kit nébuliseur Cirrus2, avec embout buccal monobloc et tuyau, Patient Unique	2.1m	35
1455002	Kit nébuliseur Cirrus2, avec embout buccal monobloc et tuyau à raccord universel, Patient Unique	2.1m	35
1464000	Kit nébuliseur Cirrus2, avec embout buccal, pièce en T et tuyau	1.8m	40
1464004	Kit nébuliseur Cirrus2, avec embout buccal, pièce en T, filtre et tuyau Sure Loc	1.8m	20
1464021	Kit nébuliseur Cirrus2, avec embout buccal monobloc, filtre et tuyau	2.1m	20
2605000	Kit nébuliseur Cirrus2, avec pièce en T pour circuit 22mm et tuyau	1.8m	40
2606000	Kit nébuliseur Cirrus2, avec pièce en T pour circuit 15mm et tuyau	1.8m	35
2608000	Kit nébuliseur Cirrus2, avec pièce en T pour circuit 10mm et tuyau	1.8m	45



Pièce en T auto-occlusive

REF	Description	Qté/bte
2609000	 Kit nébuliseur Cirrus2, avec pièce en T auto-occlusive pour circuit 22mm et tuyau 1.8m	35
1814000	Pièce en T auto-occlusive pour circuit 22mm 22M-22M-22F	40

 Illustration  Produit à faible impact environnemental

IS10.23 FR ▪ Issue 18 09.25



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et MDSAP

UK ▪ Australia ▪ Benelux ▪ Brazil ▪ Canada ▪ China ▪ Colombia ▪ Czech Republic ▪ Denmark ▪ France ▪ Germany ▪ India ▪ Ireland ▪ Italy
Japan ▪ Lithuania ▪ Malaysia ▪ Mexico ▪ Norway ▪ Philippines ▪ Portugal ▪ Russia ▪ South Africa ▪ Spain ▪ Sweden ▪ Taiwan ▪ Turkey ▪ USA